


« PARASTOP[®] HEINE ET FILTRE DE POLARISATION »

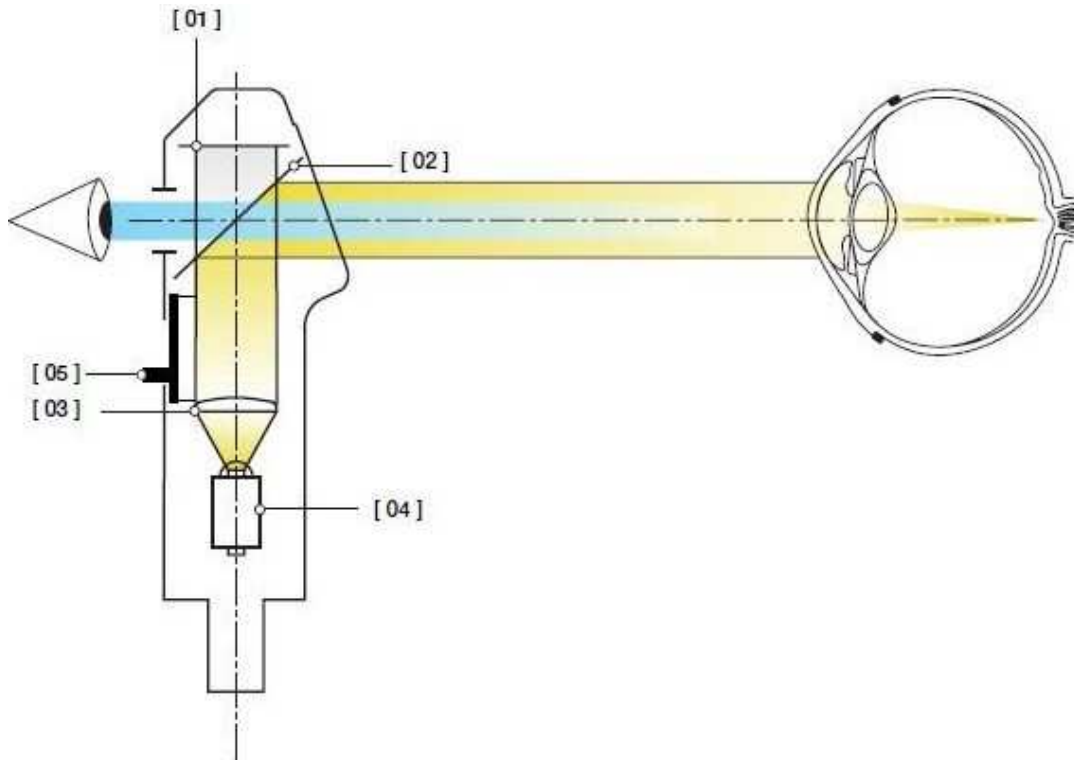

[01] Le filtre de polarisation : élimination des reflets internes et des lumières parasites.

[02] Miroir semi réflecteur : observation et éclairage simultanés.

[03] Lentille condensatrice réglable par un simple bouton de contrôle. Produit un faisceau de lumière divergent, convergent ou parallèle.

[04] Ampoule rotative spéciale skiascope pour la détection de l'axe des cylindres.

[05] ParaStop[®] simplifie et accélère la détection précise de l'axe des cylindres.